

NJHの安心保証

- ・自然故障が対象
- ・故意、過失による故障、充電電池の経年劣化および紛失（紛失保証器種を除く）は対象外
- ・補聴器ボディケースおよび消耗品は対象外
- ・シェルの再作期間：すべて2年
- ・充電器および充電器オプション、ワイヤレスオプションは1年保証

Together with you

世界性能をジャパノクオリティで

NJH

ニュージャパンヒヤリングエイド株式会社

ISO 13485 認証取得企業（東京・大阪・福岡）

ベルトーン輸入総代理店製造元

本 社：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-5-1

T E L：03-3269-4133（代表）

H P：https://www.njha.co.jp

支 社：大阪・福岡・名古屋

営業所：札幌・仙台・松山・広島・熊本・鹿児島

お求め、ご相談は当店へどうぞ。

※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。

また、フィッティング調整は購入されたお店にご依頼ください。

※装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

聞こえに関する詳しい検査は、耳鼻科にご相談ください。

保守部品の保有期間は製造販売終了より5年間です。

製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。

掲示の補聴器は非課税です。

当カタログの価格はメーカー希望小売価格です。

当カタログと補聴器および周辺機器等の色や形状は、印刷の状態により実際と異なる場合があります。

許可番号：13B2X00173

登録番号：13BZ005028／27BZ200116／40BZ200032

印刷：2025年8月

 **Beltone**

ベルトーン補聴器総合カタログ 2025.08



 **Beltone**™

Together with you

2019年発売のアメイズに、

デバイスから電話、音楽、その他のサウンドを
直接ストリーミングすることを初めて可能にした
画期的なテクノロジーを搭載。

ビジネスインテリジェンスグループが主催する

2020 BIG イノベーション アワードを受賞。

世界のモバイルユーザーの75%が

Androidスマートフォンを使用している中、

これまで直接ストリーミングは

Apple デバイスに限定されていたが、

このテクノロジーにより聴覚障害を持つ人々の

生活の質が向上しコミュニケーションも容易になった。



ベルトーンについて

1940年 アメリカミシガン州に設立

1983年 世界初のオーダーメイド補聴器を発表

1985年 NJHと日本総代理店として独占技術提携を結ぶ

1,600を超える「ベルトーンショップ」を北米で所有。

独自開発の超LSI、特許システムを保持し、洗練された音質を誇る。

常に技術向上に努め、高品質のデジタル補聴器を世界に送り出す。

アメリカ・カナダおよび世界40か国以上で販売。



「聞こえ」と補聴器

毎日楽しく、快適に過ごすために「聞こえ」はとても大切。
「聞こえにくい」と感じたら、早めの補聴器装用を。

難聴の兆し

難聴になると呼び鈴などの甲高い音に反応しなくなる、テレビの音を大きくするなど様々な変化が表れます。
また、言葉の理解が困難になります。原因は聴力低下にあるかもしれません。

難聴の種類

1. 伝音性難聴


鼓膜を中心とした外耳・中耳の損傷が原因で、中耳炎や鼓膜を傷つけたり、耳あかづまり等で起こります。

2. 感音性難聴

中耳より奥の蝸牛や聴神経の障害で通常は加齢により徐々に進行します。また、長期の抗生物質の投与や騒音持続などにより起こる可能性があります。

3. 混合性難聴

伝音性難聴と感音性難聴の両方の症状があります。

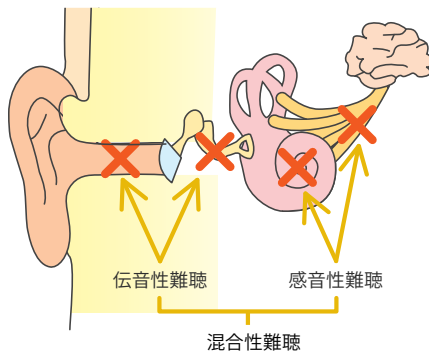

補聴器を正しく使うために知っておくこと

両耳装用の7つのメリット

- 1 音の方向や距離がわかりやすい
- 2 聞こえがより自然になり言葉が聞き取りやすくなる
- 3 片耳では聞き取りにくい小さな音も聞きやすい
- 4 聞き取りやすい範囲が両耳側に広がります
- 5 騒音の中での会話がより聞きやすい
- 6 片耳装用より、補聴器のボリュームを小さくできる
- 7 片耳装用より、はじめてから両耳装用の方が聞こえに馴染みやすく、補聴効果を得られる

早期装用のすすめ

長期間に亘る聴力低下の放置によって、補聴効果が出にくくなることもあります。ご家族や周囲の方は、ご本人の状況を理解し、あたたかい後押しをしていただくことが大切です。

補聴器を使いこなす

補聴器は原則として、1日中使い聞こえに早く慣れた方が良いと言われています。ただし、初めての方は1日に2~3時間の使用から始め、徐々に1日中使用できるように慣らしていくことをおすすめします。

補聴器はなぜ必要？

早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがあります。

- 1 より良いコミュニケーション
音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなります。
- 2 音がある豊かな人生
会話や音楽など、音がある生活は、心身ともに健康を維持でき、豊かな人生を送る手助けとなります。
- 3 生活上の危険の回避
音で周囲の状況を把握することで危険を察知し、事故を未然に防ぎやすくなります。
- 4 聴覚の刺激で脳が活性化
補聴器を装用することで聴覚神経が刺激され、様々な情動を引き起こし、脳が活性化されます。

カウンセリングから購入までの流れ

- 1 カウンセリング
お店のスタッフが聞こえの悩みや補聴器についてのご希望などを伺います。疑問や不安なども遠慮なく話してみてください。
- 2 聴力測定
現在のお耳の正確な状態を知るため、純音聴力測定や言葉の聞き取りテストなどを行います。
- 3 機種選択
聴力測定の結果を踏まえた上で、生活環境、予算、その他のご希望に合わせて最適な補聴器を選びます。
- 4 フィットティング
あなた自身の聴力の状態に合わせて、聞こえやすくなるよう音域や音質、出力などをきめ細かく調整します。
- 5 試聴
実際に補聴器を着けて音を聞いてみます。静かなところだけでなく騒がしい場所など、いろいろな環境でどう聞こえるのか試してみましょう。
- 6 購入
試聴結果を踏まえて調整を行い、聞こえ方や予算、デザインなど、納得のいく補聴器が見つかったら、いよいよ購入です。




「聞こえ」は人それぞれ

一般的に30代から高音域の聴力レベルが低下していきます。
まずは、ご自分の聴力を知ることが大切です。

年齢とともに高い音から「聞こえ」のレベルが低下

聴力低下は、年齢とともにどなたにも起こり得ることで、早い方では35歳前後から徐々に低下していくようです。聴力低下の放置で言葉の聞き分けが困難になることがあります。早期の補聴器装用によって、補聴効果がより改善されることが期待できます。

まずは自覚しにくいご自分の聴力を知ることが大切です。

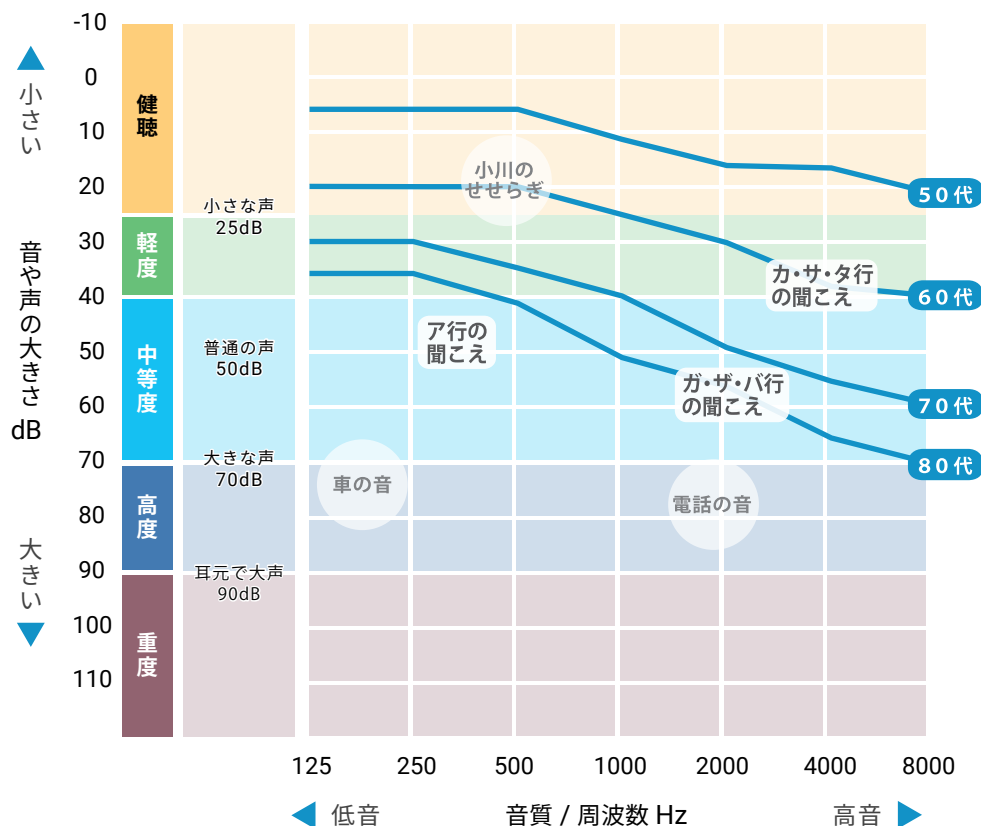



「聞こえ具合」の目安と難聴のレベル

小さな声での 会話が聞こえる	▶	健聴 25dB未満	補聴器は必要ないでしょう。
小さな声での会話 が聞き取り困難	▶	軽度 難聴 25-40dB未満	早期の補聴器装用によって、補聴効果が向上します。まずはお気軽にお店で試聴などしてみたいかがでしょう。
普通の声での会話 が聞き取り困難	▶	中等度 難聴 40-70dB未満	周囲だけでなく自分でも言葉を聞き分けにくく感じているかもしれません。早めの補聴器装用をおすすめします。
大きな声での 会話が聞き取り困難	▶	高度 難聴 70-90dB未満	普段の生活にご不便を感じていると思われます。一日も早い補聴器の装用をおすすめします。
耳元で大きな声 での会話が 聞き取り困難	▶	重度 難聴 90dB以上	生活に大きな支障があると思われます。我慢せず、すぐに相談されることをおすすめします。



補聴器スタイルガイド

補聴器を使い続けていく上でタイプ選びは大切です。聞こえやデザインに合わせて選びましょう。

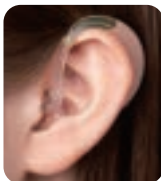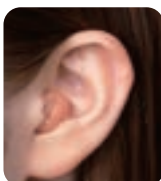補聴器のタイプ	装着イメージ	使用電池 電池寿命 (時間)	軽度難聴	中等度難聴	高度難聴	重度難聴
レシーバー分離型  補聴器本体で音をひろい、レシーバー（スピーカー）を通して、鼓膜の近くで音を出すため、音声効率がよく伝わり、言葉が明瞭に聞こえます。パワータイプを選択すれば、重度の難聴にも対応できます。		約 160 約 230~250 充電式 24 時間			MP/HP	UP
耳かけ型  小さくて目立ちにくく、自分の声も響きにくい「オープンタイプ」や、重度の難聴にも対応できる「パワータイプ」など、さまざまな種類があります。		約 200~220 約 230~500 充電式 24 時間	スリムチューブ	フック		UP
耳あな型 CIC  耳あな型オーダーメイド補聴器の中でも最もサイズが小さく、耳の奥に収まるため目立ちにくいタイプです。軽度から高度の難聴まで幅広く対応できます。		約 70~130			MP HP	
耳あな型 カナル  耳あな型オーダーメイド補聴器の中でも機能が充実しており、特に人気の高いタイプです。サイズも比較的小さく、出し入れがしやすいのが特長です。レシーバーの選択により、重度の難聴まで対応できます。		約 120~180 約 210~240 充電式 24 時間			MP HP	UP
耳あな型 カスタム  耳あな型オーダーメイド補聴器の中でも最もサイズが大きく、パワーがあるため中等度から重度の難聴まで対応できます。カナルに比べ、電池寿命が長いのが特長です。		約 230~240 充電式 24 時間			MP HP	UP



補聴器のクラスと環境への対応

補聴器のクラスと 環境の例

1対1の会話



少人数の会話



騒音下での会話



多人数の会話



会議・会合



パーティー・会食



プレミアムクラス

Envision 17 / Serene 17 / Amaze 17 /
Boost Ultra 17

ハイクラス

Envision 9 / Serene 9 / Amaze 9 /
Boost Ultra 9

ミドルクラス

Envision 6 / Serene 6 / Amaze 6 /
Boost Ultra 6

レギュラークラス

Envision 4 / Serene 4 / Rely 4 /
Commence 4 / Commence 3

ベーシッククラス

Rely 3 / Rely 2 / Rely 1 / Commence 2

新製品

Beltone Envision^{エンビジョン™}

AI と人が協調する 新しい“聴こえ”のかたち。

「ことば」と「雑音」を分離
騒音下でも聞きたい声がクリアに

騒がしい環境では、音声に雑音が混ざり、聞き取りにくさが生じます。Envision は独自開発の人工知能 (AI) 搭載の「DNN チップ」と「360 チップ」の働きにより、脳の音声処理をサポート・強化。

「ことば」と「雑音」を的確に分離し、必要なことばだけを、よりクリアな音質で耳に届けることで、あなた本来の「聴く力」を最大限に引き出します。


※Envision 17 62S-DW のみ

デュアルチップで高度な処理


日本語を含む
1,350 万の
会話を学習

1 日あたり
4 兆 9,000 億回
の演算処理

サウンドパラメーター
390 万通りを
検証

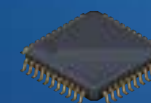

DNN チップ
プロセッサ搭載

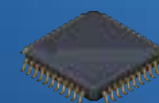

360°チップ
プロセッサ搭載



世界最小クラスの AI 補聴器

RIC EnvisionTM

エンビジョン

RIC
リチウム充電式・空気電池式
医療機器認証番号: 307ADBZX00047000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

AURACAST

クラス	価 格		保 証	音 質		
	62S-DW	64DW		チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID	クロスリンク 指向性
17	両耳 1,273,000円 補聴器本体 1,240,000円	両耳 1,240,000円	3年保証	17 チャンネル 4メモリー	●	4
	片耳 653,000円 補聴器本体 620,000円	片耳 620,000円	紛失保証 2年2回			
9	両耳 743,000円 補聴器本体 710,000円	両耳 710,000円	3年保証	14 チャンネル 4メモリー	●	3
	片耳 388,000円 補聴器本体 355,000円	片耳 355,000円	紛失保証 2年1回			
6	両耳 563,000円 補聴器本体 530,000円	両耳 530,000円	3年保証	12 チャンネル 4メモリー	●	3
	片耳 298,000円 補聴器本体 265,000円	片耳 265,000円	紛失保証 1年1回			
4	両耳 403,000円 補聴器本体 370,000円	両耳 370,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	●	2
	片耳 218,000円 補聴器本体 185,000円	片耳 185,000円	紛失保証 1年1回			

*62S-DWの上記両耳価格および片耳価格には、プレミアム充電器33,000円(税込)が含まれています。
*3マイク式MRタイプは上記価格に、片耳20,000円、両耳40,000円を加えた金額となります。

カラーバリエーション



62S-DW

64DW 13


*受注後1週間以内

言葉の強調		雑音の抑制			ハウリング 抑制	環境適応	共通性能
トゥルー/クリア フォーカス	スピーチ スポッター PRO	サウンド クリーナー PRO	インパルス ノイズ リダクション	トゥルー ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー2	スマート ゲイン	
トゥルー フォーカス ^{※1} /クリア フォーカス	●	環境別自動/ 強/中強 中/弱/OFF	強/中 弱/OFF	● ^{※1}	ホイッスル ストップ/ 中/弱 /OFF	PRO	ハンズフリー通話 風切り音防止 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード 低周波補正 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
ウルトラ フォーカス2	●	強/中強 /中/弱 /OFF	強/中 弱/OFF	—	強/中/ 弱/OFF	●	
ウルトラ フォーカス	●	中強/中/ 弱/OFF	中/弱/OFF	—	強/中/ 弱/OFF	●	
—	●	中/弱/OFF	中/弱/OFF	—	強/中/ 弱/OFF	●	

*D : 指向性 W : ワイヤレス ※1: 62S-DWのみ (64DWはクリアフォーカス)

適応範囲と聴力レベル

■ 軽 中	MM (MRタイプ)
□ 軽 中 高	MP (標準)
□ 軽 中 高 重	HP

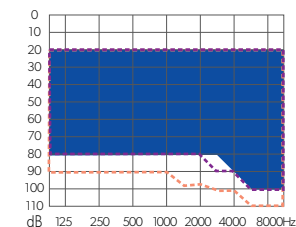

RIC CommenceTM

コメンス

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

AURACAST

RIC
リチウム充電式・空気電池式

医療機器認証番号: 307ADBZX00048000

クラス	価 格		保 証	音 質	音声の方向感の 再現と環境把握指向性	
	62DW	64DW		チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID	クロスリンク 指向性
4	両耳 319,800円 補聴器本体 300,000円 片耳 169,800円 補聴器本体 150,000円	両耳 300,000円 片耳 150,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	●	2
3	両耳 269,800円 補聴器本体 250,000円 片耳 144,800円 補聴器本体 125,000円	両耳 250,000円 片耳 125,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	—	—
2	—	両耳 190,000円 片耳 95,000円	2年保証	10 チャンネル 4メモリー	—	—

*62DWの上記両耳価格および片耳価格には、デスクトップ充電器19,800円(税込)が含まれています。
*3マイク式MRタイプは非対応です。


カラーバリエーション



言葉の強調		雑音の抑制			ハウリング 抑制	環境適応	共通性能
スピーチ スポッター PRO	スマート ビーム ステアリング	サウンド クリーナー	インパルス ノイズ リダクション	サイレンサー	新逆位相 フィードバック イレーサー2	スマート ゲイン	
●	●	中/弱/OFF	中/弱/OFF	中/弱/OFF	強/中/ 弱/OFF	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード※1 低周波補正 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
●	●	弱/OFF	弱/OFF	弱/OFF	強/中/ 弱/OFF	-	
●	-	弱/OFF	-	弱/OFF	強/中/ 弱/OFF	-	

*D: 指向性 W: ワイヤレス ※1: 4クラスのみ

適応範囲と聴力レベル

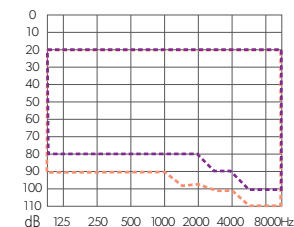

RIC SereneTM シリーン

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

AURACAST

RIC
リチウム充電式・空気電池式
医療機器認証番号:305ADBZX00098000



62S-DW

63DW 312 312

クラス	価 格		保 証	音 質		
	62S-DW	63DW312		チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID	クロスリンク 指向性
17	両耳 1,203,000円 補聴器本体 1,170,000円	両耳 1,170,000円	3年保証 紛失保証 2年2回	17 チャンネル 4メモリー	●	4
	片耳 618,000円 補聴器本体 585,000円	片耳 585,000円				
9	両耳 873,000円 補聴器本体 840,000円	両耳 840,000円	3年保証 紛失保証 2年1回	14 チャンネル 4メモリー	●	3
	片耳 453,000円 補聴器本体 420,000円	片耳 420,000円				
6	両耳 537,000円 補聴器本体 504,000円	両耳 504,000円	3年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー	●	2
	片耳 285,000円 補聴器本体 252,000円	片耳 252,000円				
4	両耳 363,000円 補聴器本体 330,000円	両耳 330,000円	2年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー	-	1
	片耳 198,000円 補聴器本体 165,000円	片耳 165,000円				

*62S-DWの上記両耳価格および片耳価格には、プレミアム充電器33,000円(税込)が含まれています。
*3マイク式MRタイプは上記価格に、片耳20,000円、両耳40,000円を加えた金額となります。

カラーバリエーション




言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング抑制	環境適応		共通性能
ウルトラフォーカス	スピーチスポッター	サウンドクリーナーPRO	インパルスノイズリダクション	新逆位相フィードバックイレーサー2	スマートゲイン	サウンドシーン balancer	
2	PRO	環境別自動/強/中強中/弱/OFF	強/中弱/OFF	ホイッスルストップ/中/弱/OFF	PRO	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード 低周波補正 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
1	PRO	中強/中弱/OFF	強/中弱/OFF	強/中弱/OFF	●	-	
-	●	中/弱/OFF	弱/OFF	強/中弱/OFF	●	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中弱/OFF	-	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中弱/OFF	-	-	

*D:指向性 W:ワイヤレス

適応範囲と聴力レベル

■	軽 中	MM (MRタイプ)
□	軽 中 高	MP (標準)
□	軽 中 高 重	HP

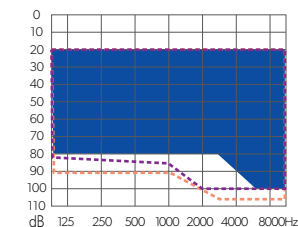



SereneTM

シリーン

耳かけ
リチウム充電式

医療機器認証番号:305ADBZX00098000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

AURACAST

クラス	価 格	保 証	音 質	音声の方向感の再現と環境把握指向性	
			チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID	クロスリンク 指向性
76DW 86DW	両耳 1,177,800円 補聴器本体 1,158,000円 片耳 598,800円 補聴器本体 579,000円	3年保証 紛失保証 2年2回	17 チャンネル 4メモリー	●	4
	両耳 839,800円 補聴器本体 820,000円 片耳 429,800円 補聴器本体 410,000円	3年保証 紛失保証 2年1回	14 チャンネル 4メモリー	●	3
	両耳 479,800円 補聴器本体 460,000円 片耳 249,800円 補聴器本体 230,000円	3年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー	●	2
	両耳 345,800円 補聴器本体 326,000円 片耳 182,800円 補聴器本体 163,000円	2年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー	-	1

*上記両耳価格および片耳価格には、デスクトップ充電器19,800円(税込)が含まれています。

カラーバリエーション



エスプレッソ



グラファイト



スパークリング
シルバー



ゴールド



レッド



76DW



86DW




デスクトップ充電器
【蓄電機能なし】

言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング抑制	環境適応		共通性能
ウルトラ フォーカス	スピーチ スポッター	サウンド クリーナー PRO	インパルス ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー2	スマート ゲイン	サウンド シーン balancer	
2	PRO	環境別自動/ 強/中強 中/弱/OFF	強/中 弱/OFF	ホイスル ストップ/ 中/弱/OFF	PRO	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード 低周波補正※1 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
1	PRO	中強/中/ 弱/OFF	強/中 弱/OFF	強/中/弱 /OFF	●	-	
-	●	中/弱/OFF	弱/OFF	強/中/弱 /OFF	●	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中/弱 /OFF	-	-	

*D:指向性 W:ワイヤレス ※1:86DWのみ

適応範囲と聴力レベル

■ 軽 中	76DW スリムチューブ
□ 軽 中 高	76DW フック
□ 軽 中 高 重	86DW

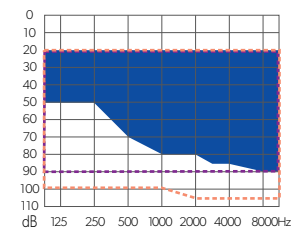



SereneTM

シリーン

オーダーメイド
リチウム充電式(カナル/カスタム)
空気電池式(CIC/カナル)

医療機器認証番号:306ADBZX00042000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

AURACAST

クラス	価 格		保 証	音 質	音声の方向感の 再現と環境把握指向性	
	充電オーダー	CIC/カナルDW		チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID ※3	クロスリンク 指向性 ※3
17	両耳 1,303,000円 補聴器本体 1,270,000円 片耳 668,000円 補聴器本体 635,000円	両耳 1,270,000円 片耳 635,000円	3年保証 紛失保証 2年2回	17 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	4
9	両耳 933,000円 補聴器本体 900,000円 片耳 483,000円 補聴器本体 450,000円	両耳 900,000円 片耳 450,000円	3年保証 紛失保証 2年1回	14 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	3
6	両耳 593,000円 補聴器本体 560,000円 片耳 313,000円 補聴器本体 280,000円	両耳 560,000円 片耳 280,000円	3年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	2
4	両耳 413,000円 補聴器本体 380,000円 片耳 223,000円 補聴器本体 190,000円	両耳 380,000円 片耳 190,000円	2年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	—	1

*充電オーダーの上記両耳価格および片耳価格には、オーダーメイド充電器33,000円(税込)が含まれています。
*耳型によってはカナルDWCでご注文いただいた場合でもカスタムDWCに変更となる場合があります。

充電式カラーバリエーション



フェイスプレート・シェルカラー
ベージュ(標準)/チャコール


電池式カラーバリエーション

フェイスプレート



ベージュ(標準)/チャコール

シェル

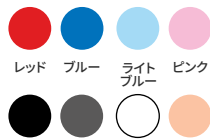

ブラック チャコール ホワイト ベージュ
(標準)

*カラーシェル(電池式のみ)
*両耳装着は、左右で別々の色をご指定
いただけます。
*チャコールのフェイスプレートは通常
納期より2日多くいただきます。
*カラーシェルのご指定がない場合は、
フェイスプレートと同一カラーが標準と
なります。



オーダーメイド充電器
【蓄電機能なし】

*CIC: プッシュボタンなし標準・選択可(後付不可)
*カナルDWC・カスタムDWC・カナルDW: ポリウム不可

カナルDWC カスタムDWC

CIC 10A

カナルDW 312


言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング 抑制	環境適応		共通性能
ウルトラ フォーカス ※3	スピーチ スポッター ※1	サウンド クリーナー PRO	インパルス ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー-2	スマート ゲイン	サウンド シーン баланサー	
2	PRO	環境別自動/ 強/中強 中/弱/OFF	強/中 弱/OFF	ホイッスル ストップ/ 中/弱/OFF	PRO	●	ハンズフリー通話 ※1 風切り音防止 ※1 両耳通信 ※1 両耳電話対応 ミュージックモード 低周波補正 ※2 サイレンサー サウンドシフター ※1 HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア ※1 IP-68
1	PRO	中強/中/ 弱/OFF	強/中 弱/OFF	強/中 弱/OFF	●	-	
-	●	中/弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	●	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	-	-	

*D: 指向性 W: ワイヤレス C: 充電式 ※1: CICは非対応 ※2: UPのみ ※3: CICとカナルDWは非対応

適応範囲と聴力レベル

- MPLレシーバー
(CIC・カナル標準/カスタム選択可)
- HPレシーバー
(CIC/カナル/カスタム選択可)
- UPLレシーバー
(カナル選択可/カスタム標準)

*CICはUP選択不可

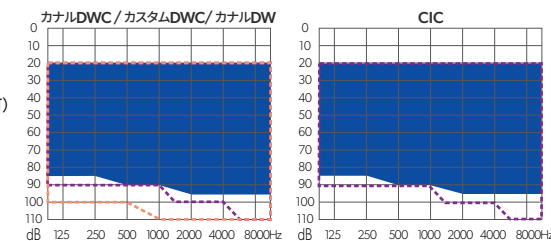



AchieveTM

アチーブ

オーダーメイド
リチウム充電式(カナル/カスタム)
空気電池式(CIC)

医療機器認証番号:305ADBZX00069000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android



オーダーメイド充電器
【蓄電機能なし】

*CIC:プッシュボタンなし標準・選択可(後付不可)
*カナルDWC・カスタムDWC:ボリューム不可



カナルDWC カスタムDWC

CIC 10A

クラス	価 格		保 証	音 質	音声の方向感の 再現と環境把握指向性	
	充電オーダー	CIC		チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID ※1	クロスリンク 指向性 ※1
17	両耳 1,193,000円 補聴器本体 1,160,000円	両耳 1,120,000円	3年保証 紛失保証 2年2回	17 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	4
	片耳 613,000円 補聴器本体 580,000円	片耳 560,000円				
9	両耳 853,000円 補聴器本体 820,000円	両耳 780,000円	3年保証 紛失保証 2年1回	14 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	3
	片耳 443,000円 補聴器本体 410,000円	片耳 390,000円				
6	両耳 573,000円 補聴器本体 540,000円	両耳 530,000円	3年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	2
	片耳 303,000円 補聴器本体 270,000円	片耳 265,000円				
6 ライト	両耳 539,000円 補聴器本体 506,000円	両耳 496,000円	2年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	●	2
	片耳 286,000円 補聴器本体 253,000円	片耳 248,000円				
4	両耳 413,000円 補聴器本体 380,000円	両耳 370,000円	3年保証 紛失保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	－	1
	片耳 223,000円 補聴器本体 190,000円	片耳 185,000円				
4 ライト	両耳 379,000円 補聴器本体 346,000円	両耳 336,000円	2年保証 紛失半額保証 1年1回	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	－	1
	片耳 206,000円 補聴器本体 173,000円	片耳 168,000円				

*上記両耳価格および片耳価格には、オーダーメイド充電器33,000円(税込)が含まれています。

*耳型によってはカナルDWCでご注文いただいた場合でもカスタムDWCに変更となる場合があります。

充電式カラーバリエーション



フェイスプレート・シェルカラー
ベージュ(標準)/チャコール


電池式カラーバリエーション

フェイスプレート



ベージュ(標準)/チャコール

シェル

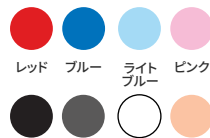

ブラック チャコール ホワイト ベージュ
(標準)

*カラーシェル(電池式のみ)
*両耳装用は、左右で別々の色をご指定
いただけます。
*チャコールのフェイスプレートは通常
納期より2日多くいただきます。
*カラーシェルのご指定がない場合は、
フェイスプレートと同一カラーが標準と
なります。

言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング 抑制	環境適応		共通性能
ウルトラ フォーカス ※1	スピーチ スポッター ※1	サウンド クリーナー PRO	インパルス ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー2	スマート ゲイン	サウンド シーン баланサー	
2	PRO	環境別自動/ 強/中強 中/弱/OFF	強/中 弱/OFF	ホイッスル ストップ/ 中/弱/OFF	PRO	●	ハンズフリー通話※1 風切り音防止※1 両耳通信※1 両耳電話対応※1 ミュージックモード 低周波補正※2 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア※1 IP-68
1	PRO	中強/中/ 弱/OFF	強/中 弱/OFF	強/中 弱/OFF	●	-	
-	●	中/弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	●	-	
-	●	中/弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	●	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	-	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	-	-	
-	●	弱/OFF	弱/OFF	強/中 弱/OFF	-	-	

*D:指向性 W:ワイヤレス C:充電式 ※1:CICは非対応 ※2:UPのみ


適応範囲と聴力レベル

MPレシーバー
(CIC・カナル標準/カスタム選択可)

HPレシーバー
(CIC/カナル/カスタム選択可)

UPレシーバー
(カナル選択可/カスタム標準)

*CICはUP選択不可

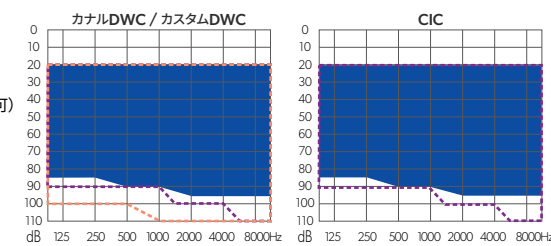



耳かけパワータイプ
空気電池式

医療機器認証番号: 230ADBZX00090000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android



76DW



86DW

クラス		価格	保証	音質		
				チャンネル メモリー	音声の方向感の 再現と環境把握指向性 パーソナル サウンドID	クロスリンク 指向性
76DW 86DW	17	両耳 900,000円 片耳 450,000円	3年保証	17 チャンネル 4メモリー	●	2
	9	両耳 496,000円 片耳 248,000円	2年保証	14 チャンネル 4メモリー	-	1
	6	両耳 356,000円 片耳 178,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	-	-

カラーバリエーション



チャコール



スターリンググレー



ブラウン




グレー

言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング 抑制	環境適応		共通性能
ウルトラ フォーカス	スピーチ スポッター	サウンド クリーナー PRO	インパルス ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー	スマート ゲイン	サウンド シーン balancer	
-	PRO	環境別自動/ 強/中/弱 /OFF	強/中 弱/OFF	ホイッスル ストップ/ 強/中/弱 /OFF	PRO	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード 低周波補正 ※1 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
-	PRO	強/中/ 弱/OFF	強/中 弱/OFF	強/中/ 弱/OFF	●	-	
-	●	中/弱/OFF	-	中/弱/OFF	-	-	
-	●	中/弱/OFF	-	中/弱/OFF	-	-	
-	●	中/弱/OFF	-	中/弱/OFF	-	-	
-	●	中/弱/OFF	-	中/弱/OFF	-	-	

*D: 指向性 W: ワイヤレス ※1: 86DWのみ

適応範囲と聴力レベル

■ 軽 中	76DW スリムチューブ
□ 軽 中 高	76DW フック
□ 軽 中 高 重	86DW

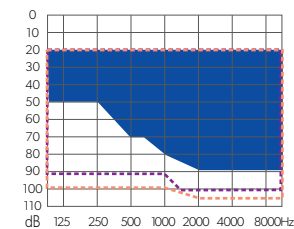

オーダー
メイド

AmazeTM
アメイズ

オーダーメイド
空気電池式

医療機器認証番号:302ADBZX00022000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

クラス	価格	保証	音質		
			チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID	空間的 指向性 ※1
Amaze	CIC カナルDW カスタムDW 17	両耳 876,000円 片耳 438,000円 3年保証	17 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	—	●
	CIC カナルDW カスタムDW 9	両耳 496,000円 片耳 248,000円 2年保証	14 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	—	●
	CIC カナルDW カスタムDW 6	両耳 356,000円 片耳 178,000円 2年保証	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション	—	●

シェルカラーバリエーション



*両耳装用は、左右で別々の色をご指定いただけます。



CIC



カナルDW



カナルDW-13




カスタムDW

*CIC: プッシュボタンなし標準・選択可(後付不可)
*カナルDW・カスタムDW: ボリューム選択可(後付不可)

言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング抑制	環境適応		共通性能
ウルトラフォーカス	スピーチスポッター	サウンドクリーナーPRO	インパルスノイズリダクション	新逆位相フィードバックイレーサー	スマートゲイン	サウンドシーン balancer	
—	PRO	環境別自動/強/中/弱/OFF	強/中弱/OFF	ホイッスルストップ/強/中/弱/OFF	PRO	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 ※1 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード 低周波補正 ※2 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
—	PRO	強/中/弱/OFF	強/中弱/OFF	強/中/弱/OFF	●	—	
—	●	中/弱/OFF	—	中/弱/OFF	—	—	

*D: 指向性 W: ワイヤレス ※1: CICは非対応 ※2: UPのみ対応


適応範囲と聴力レベル

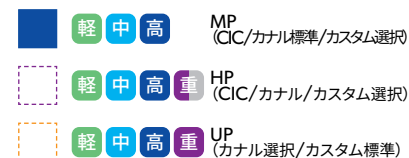

*CICはUP選択不可



RIC / 耳かけ
リチウム充電式・空気電池式
医療機器認証番号:303ADBZX00068000

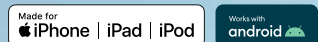

クラス	価格	保証	音質			音声の方向感の再現と環境把握指向性
			チャンネルメモリー	パーソナルサウンドID	空間的指向性	
Rely	63DW 4	両耳 片耳 299,800円 159,800円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	-	●
	64DW 4 76DW 86DW	両耳 片耳 280,000円 140,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	-	●
	63DW 3	両耳 片耳 249,800円 134,800円	2年保証	8 チャンネル 4メモリー	-	-
	64DW 3 76DW 86DW	両耳 片耳 230,000円 115,000円	2年保証	8 チャンネル 4メモリー	-	-
	64DW 2 76DW 86DW	両耳 片耳 196,000円 98,000円	2年保証	6 チャンネル 4メモリー	-	-
	76DW 1 86DW	両耳 片耳 156,000円 78,000円	2年保証	4 チャンネル 2メモリー	-	-

*上記Rely63DW両耳価格および片耳価格には、デスクトップ充電器¥19,800(税込)が含まれています。
*Rely2-95DWは33ページにございます。


カラーバリエーション



言葉の強調	雑音の抑制		ハウリング抑制	ワイヤレス			共通性能
	スピーチスポッター	サウンドクリナー	インパルスノイズリダクション	新逆位相フィードバックイレーサー	ワイヤレスオプション	ダイレクトオーディオストリーミング HearMaxアプリ	
●	弱/OFF	弱/OFF	中/弱/OFF	●	●	●	ハンズフリー通話 風切り音防止※4 両耳通信※2 両耳電話対応 ミュージックモード※3 低周波補正※1 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
●	弱/OFF	弱/OFF	中/弱/OFF	●	●	●	
●	弱/OFF	-	中/弱/OFF	●	●	●	
●	弱/OFF	-	中/弱/OFF	●	●	●	
●	弱/OFF	-	中/弱/OFF	●	-	●	
-	弱/OFF	-	中/弱/OFF	リモコンのみ	-	●	

*D:指向性 W:ワイヤレス ※1:86DWのみ(1クラス除く) ※2:4と3クラスのみ ※3:4クラスのみ ※4:1クラスは非対応

適応範囲と聴力レベル

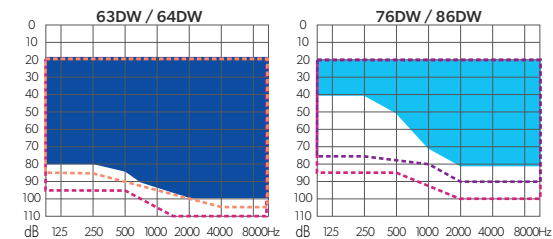



Rely™

リライ

オーダーメイド
空気電池式

医療機器認証番号:303ADBZX00069000

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

クラス	価格	保証	音質		
			チャンネル メモリー	パーソナル サウンド ID	空間的 指向性 ※1
Rely	CIC カナルDW カスタムDW 4	両耳 片耳	296,000円 148,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション
	CIC カナルDW カスタムDW 3	両耳 片耳	256,000円 128,000円	2年保証	8 チャンネル 4メモリー ※CICはオプション
	カナルDW カスタムDW 2	両耳 片耳	196,000円 98,000円	2年保証	6 チャンネル 4メモリー

シェルカラーバリエーション



*両耳装用は、左右で別々の色をご指定いただけます。




*CIC: プッシュボタンなし標準・選択可 (後付不可)
*カナルDW・カスタムDW: ボリューム選択可 (後付不可)

言葉の強調	雑音の抑制		ハウリング抑制	ワイヤレス			共通性能
スピーチ スポッター ※1	サウンド クリーナー	インパルス ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー	ワイヤレス オプション ※1	ダイレクト オーディオ ストリーミング ※1	HearMax アプリ ※1	
●	弱/OFF	●	中/弱/OFF	●	●	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 ※1 両耳通信 両耳電話対応 ミュージックモード ※2 低周波補正 ※3 サイレンサー サウンドシフター HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア ※1 IP-68
●	弱/OFF	—	中/弱/OFF	●	●	●	
●	弱/OFF	—	中/弱/OFF	●	—	●	

*D: 指向性 W: ワイヤレス ※1: CICは非対応 ※2: 4クラスのみ ※3: UPのみ

適応範囲と聴力レベル

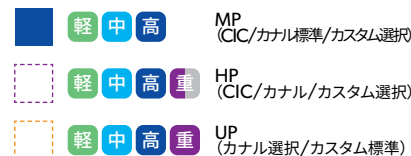

*CICはUP選択不可

パワー
BTE

Boost UltraTM

ブースト ウルトラ

リライ

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android


耳かけパワータイプ
空気電池式

医療機器認証番号:226ACBZX00056000 (ブースト)
医療機器認証番号:303ADBZX00068000 (リライ)

クラス		価 格	保 証	音 質	音声の方向感の 再現と環境把握指向性	
				チャンネル メモリー	パーソナル サウンドID	クロスリンク 指向性
Boost Ultra	17	両耳 960,000円 片耳 480,000円	3年保証	17 チャンネル 4メモリー	●	2
	9	両耳 536,000円 片耳 268,000円	2年保証	14 チャンネル 4メモリー	—	1
	6	両耳 436,000円 片耳 218,000円	2年保証	12 チャンネル 4メモリー	—	—
	2	両耳 256,000円 片耳 128,000円	2年保証	6 チャンネル 4メモリー	—	—
Rely 95DW						

適応範囲と聴力レベル

中 高 重

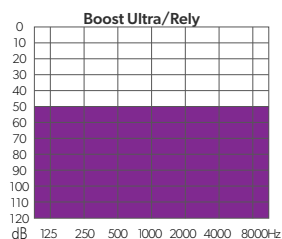

言葉の強調		雑音の抑制		ハウリング 抑制	環境適応		共通性能
ウルトラ フォーカス	スピーチ スポッター	サウンド クリーナー PRO	インパルス ノイズ リダクション	新逆位相 フィードバック イレーサー2	スマート ゲイン	サウンド シーン balancer	
—	PRO	環境別自動/ 強/中/弱 /OFF	強/中 弱/OFF	ホイスル ストップ/ 強/中/弱 /OFF	PRO	●	ハンズフリー通話 風切り音防止 両耳通信 ※1 両耳電話対応 ミュージックモード ※1 低周波補正 サイレンサー サウンドシフター ※1 HPF80ナノブロック オートフォン リモートケア IP-68
—	PRO	強/中/ 弱/OFF	強/中 弱/OFF	強/中/ 弱/OFF	●	—	
—	●	中/弱/OFF	—	中/弱/OFF	—	—	
—	●	弱/OFF	—	中/弱/OFF	—	—	

*D:指向性 W:ワイヤレス ※1:Boost Ultraのみ

S90-SP

アナログ パワータイプ耳かけ

医療機器認証番号:222008ZX0037000

*アナログボリューム *LC・HC・MPO *テレコイル

1年
保証

片耳 98,000円

675






「日本語」がよりはっきり

DNNチップで高度な処理

人間の脳の神経回路を模倣した人工知能の仕組み（ニューラルネットワーク）を、より深く、複雑にしたものを高速かつ効率的に処理するために設計された専用のハードウェアチップのことです。

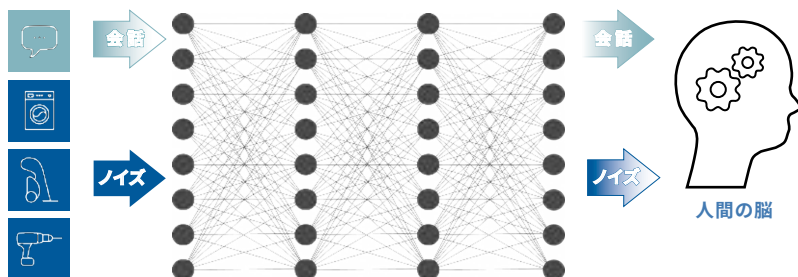

人が両耳で感じる本来の「聞こえ」を再現

MR (3マイク方式)

耳の形状を活用した集音効果

レシーバーに配置された3番目のマイクが耳の形状を活かし、今までよりも自然な音質、集音効果の向上、風の雑音の軽減を実現しました。



MRが好まれる5つのポイント

より自然な音質

風の音も
気になり
にくい

背後の雑音
がより静か

音環境を学
習し方向感
を改善

電話が
簡単

「言葉」にフォーカスして会話を強調

左右の補聴器が会話音の周波数に対して高い指向性を発揮し、両耳通信によって、適正化と一体化された自然な聞こえを実現します。騒がしい環境下でも、周囲の雑音を抑えつつ、正面の会話音にしっかりとフォーカスします。

トゥルーフォーカス

Envision 17 62S-DWのみ搭載※両耳装着時

DNNチップに搭載されている「トゥルーノイズリダクション（雑音低減システム）」は、多くの会話音声と雑音サンプルで学習されたAI技術です。両耳通信による新しい4マイク方式のビームフォーマーを組み合わせることで、会話と雑音を識別し、聞きたい音を最適に判断。より自然で快適な会話音をお届けします。



トゥルーフォーカス
DNN/トゥルーノイズリダクションによる
ビームフォーミング

クリアフォーカス

Envision 17 64DWのみ搭載※両耳装着時

両耳通信による新しい4マイク方式ビームフォーマーとサウンドクリーナーを組み合わせることで、ミキシングポイントの周波数帯域を250Hzまで拡張。強力な指向性により、雑音下でも正面の会話音をより聞き取りやすくします。



クリア/ウルトラフォーカス
サウンドクリーナプロによるビームフォーミング

ウルトラフォーカス (2/1) ※両耳装着時

両耳通信による4マイク方式ビームフォーマーとサウンドクリーナーを組み合わせることで、ミキシングポイントの周波数帯域を550Hzに設定。強力な指向性により、前方の会話音声に対して最適なSN比（信号対雑音比）を実現します。

クロスリンク指向性 (*4/3/2/1) ※両耳装着時

脳に音声を受けいれると同時に分析を行い、方向や距離を瞬時に認識する人間の聴覚を応用した機能。両耳装用の補聴器が互いにコミュニケーションを取り合い、環境音の可聴性を損なわず、雑音下での会話の理解を高めます。

スピーチスポッター (PRO)

前方の会話音を感知すると、自動的に指向性モードに切り換わります。また、音声周波数の高音低音を把握し、特に低音域の雑音を抑えて言葉をより明瞭にします。さらに PRO は会話音源の位置を捉え指向性幅を自動調整（ミキシングポイント可変）するスマートビームステアリングを搭載。

ミキシングポイント 低音域を無指向性によりにより良質な音質を保ち、会話に必要な音域は指向性で良好に保つための調整機能



「日本語」がよりはっきり

生活環境に適した音量に自動で調整

環境認識

スマートゲイン（プロ）

マイクから入ってくる音の情報により環境認識を行い、装用者がどのような音声環境にいるのかを7つの環境に区分し、音量をその環境に適した聞こえに自動調整します。さらにスマートゲイン・プロは、7つの環境ごとに適した雑音抑制を自動選択します。

パーソナル・サウンドID ※両耳装用時

周囲360°から、必要な音声を選んで注意を向ける人間の脳と自然な聞こえを追求

私たちは、左右の耳で空間を認識し、周囲の様々な音声の方向を掴むことができます。パーソナル・サウンドIDは、クロスリンク指向性と連動し、人間が持つ自然で豊かな聞こえの環境認識を助けます。





左右の耳が、音声に対して感じる自然な距離感を復元

また、人間が左右それぞれの耳から音源に対して感じる微妙な差を復元し、より自然な距離感や方向感が得られます。



耳が本来聞き分ける幅広い周波数帯を復元して補う機能

人間の耳介の形状本来の集音特性を電子的に模倣することによって言葉の聞き取りを改善します。

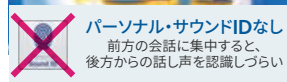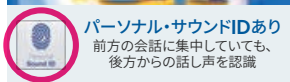

雑音を抑制して言葉を強調

雑音抑制

サウンドクリーナー（プロ）

ベルトーン独自の雑音抑制機能サウンドクリーナープロは、会話の音量を抑えずに不要な雑音だけを効果的に抑え、澄んだ会話を生み出します。さらに、サウンドシーンバランサーは会話の音質に影響を与えずに背景の環境音を抑制します。

雑音を取り除くことで会話が明瞭!



補聴器のクラスと性能比較
について詳しくはこちら

<https://www.njha.co.jp/products/beltone>



聞こえない側の音を 聞こえる耳へ届ける「CROS補聴システム」

新製品

CROS送信機

聞こえ難い耳側にCROS送信機を装着し送信機のマイクロホンで拾った音を、反対側の補聴器（受信機）に通信することで両側からの音を聞き取りやすくします。聴力に大きな左右差がある方、または片耳難聴のため生活に不自由を感じている方に適しています。



2年保証
紛失保証
1年1回

充電式（充電器は別途必要） 160,000円（非課税）

・充電時間：3時間 ・使用時間：16時間

・対応機種：Envision Serene

・Envision：サンド・スパークリングシルバー・ゴールド・ブロンズ・レッド

・Serene：エスブレッツ・グラファイト・スパークリングシルバー・ゴールド



全く
聞こえない耳
クロス送信機



聞こえる耳
または軽い難聴
補聴器




優れた撥水加工で補聴器の内部部品まで保護

防水加工

HPF80ナノブロック

補聴器の全内部部品、ボディケースにプラズマコーティングを施し、汗や汚れなどから保護します。※ジェル・消耗品を除く

水を弾く内部部品とボディ

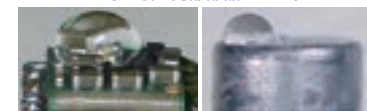

国際保護等級 IP68

集塵室内に8時間放置しても機能し、水深1~3mの水中に長時間浸しても内部に水が浸入せず、性能を損なわないことが確認されています。これらの防水性と耐久性は、ヨーロッパの第三者機関からも認められています。



「スマートフォン」とつながる

世界が広がり暮らしをもっと楽しめる 便利なスマート補聴器

ブルートゥース オーラキャストに対応
(Envision Commence Serene シリーズ)

空港や駅、スタジアムなどの公共の場での放送・配信される音声
または対応する全ての機器に直接アクセスできます。

AURACAST



何かをしながら手放して

スマートフォンと直接ハンズフリー無線通話 ※一部器種非対応

ペアリングしたスマートフォンの通話を補聴器にワイヤレス送信
します。着信音は補聴器から直接鳴るので補聴器のボタンを押す
だけで通話に切り替える事ができ、携帯電話を手を持つ必要があ
りません。



iPhoneやAndroidで気軽に調整 ※一部器種非対応

メモリー切り換え

自宅環境用の聞こえ、職場用の聞こえな
ど、環境ごとの聞こえに切り換えることが
できます。

ワンタッチ切り換え

騒がしい場所にいる時、ワンタッチで快適性
のある聞こえに切り換えることができます。

音量調整

お手元で簡単に音量の大小を調整するこ
とができます。

ライブ再生※

iPhoneで話し手の声を直接聞くボイスリ
ンクと同じ働きも。声を聞き逃したくない
話し手にiPhoneを持ってもらって、話し
手の音声で直接、より明瞭に届きます。



お気に入り登録

日常よく行く場所ので適した聞こえに調整
し、登録することができます。

詳細設定

器種に応じて雑音抑制や指向性、低音／中
音／高音のバランスなど、聞こえの詳しい
調整をすることができます。

位置感知※

補聴器とiPhoneやAndroidの距離を表示
して紛失を防止します。

Apple Watchで調整

Apple Watchで気軽に調整ができます。

タップコントロール※

補聴器をダブルタップすることで電話が取
れます。

リモートケア

どこにいても
調整が受けられます。

*Envision/Commence
/Serene/Achieve
/Amaze/Rely/BoostUI
traのワイヤレスタイプ

1

装用者は、
HearMax
アプリを通じて
調整を依頼します



2

お店は、
届いた要望から
調整した補聴器の
設定値を送信します



3

装用者は、
受信した更新データを
アプリで読み込み、
調整を完了させます



スマートフォンと補聴器の
互換性について詳しくはこちら
<https://www.belton.com/en-us/support/compatibility>




スマートフォン調整
無料アプリ
Hear Max
への対応

Android
の方は
こちら



iPhone
iPad
の方は
こちら

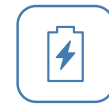

置くだけ便利な「充電器」

置くだけで充電 電池交換が不要のリチウム充電式

扱いやすい非接触充電式

補聴器と充電器の接触不十分による充電不備を起こしにくい非接触（インダクティブ）
充電式のため、高齢者にもより扱いやすい充電器です。

電源を外しても数日分充電できる小型携帯ケース

プレミアム充電器は蓄電式です。フル蓄電により、電源コードを外しても両耳分2台の補
聴器を3回フル充電できるため数日間の外泊や出張にも大変便利です。

*デスクトップ充電器／オーダーメイド充電器は蓄電式ではありません。



名 称	プレミアム充電器	デスクトップ充電器	オーダーメイド充電器
対応器種	Envision 62S-DW Serene 62S-DW	Commence 62DW Serene 76/86DW Rely 63DW (4/3)	Serene/Achieve カナル/カスタムDWC
外 観			
価 格 1年保証	33,000円(税込)	19,800円(税込)	33,000円(税込)

毎日短時間で充電完了：終日使用可

毎日就寝前などに充電器に差し込むだけで朝
にはフル充電が完了。一回の充電で一日中電
池切れを気にせずご使用できます。

RIC・耳かけ充電器

補聴器への 充電時間	補聴器の 電池寿命
3時間※フル充電	最長24時間
1時間	最長16時間
30分	最長8時間

オーダーメイド充電器

補聴器への 充電時間	補聴器の 電池寿命
5時間※フル充電	最長24時間
1時間	最長8時間
10分	最長1時間

充電器	非接触充電	マグネット式カバー	LED表示	蓄電機能
プレミアム	○	○	○	○
デスクトップ	○	—	—	—
オーダーメイド	○	○	○	—

※ワイヤレス機器を一定時間使用した場合、電池寿命が短くなります。※充電環境により充電に必要な時間が長時間となる場合があります。※リチウム充電池は経年使用により容量が低下します。(1～2年後：90～70%、3～4年後：80～60%、使用状況により異なります) ※ 0～10℃の場合、充電時間が長くなる場合があります。(0℃未満または40℃を超える場合充電されません) ※ 温度の上がる電気乾燥機のご使用を避けてください。熱が充電池を劣化させます。※充電頻度は電池寿命に影響ありませんので毎日充電してください。

「ワイヤレス」でつながる

お手元で簡単操作できるリモコンや
テレビとの無線通信で毎日をもっと便利に
2.4GHz中継機不要のワイヤレスシステム



テレビ音声を補聴器に無線送信

補聴器に無線で直接テレビの音が届くので快適にテレビを楽しめます。




1年保証

TVストリーマー+

TVストリーマー+に接続するだけで、補聴器に直接ストリーミングされた明瞭な音声とクリアなサウンドをすぐに楽しむことができます。また、テレビのスピーカーから再生されるサウンドを妨げることなく、補聴器の音量を調整できます。オーラキャスト対応。

46,200円(税込)

※Envision Commence Sereneのみ対応

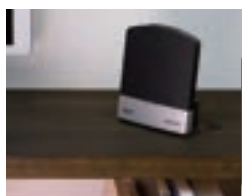

1年保証

テレビリンク2

簡単にテレビ接続できるアダプターから補聴器に直接、より明瞭な音声を無線で届けます。
(複数の補聴器に対し同時に可能)

- ・ドルビーデジタル音声に対応

38,500円(税込)



離れた人の声を補聴器に無線送信

声を聞き逃したくない話し手の胸元につけたり近くに置くと、話し手のより明瞭な声が補聴器に無線で届きます。また、マルチマイク+とボイスリンク・プロは、付属ケーブルを使ってテレビリンクのように使えます。

マルチマイク+/ボイスリンク

- ・オーラキャスト対応 (マルチマイク+)
- ・小型、軽量
- ・落下探知機能
- ・聴取環境に応じて指向性/無指向性を自動切替 (マルチマイク+/プロ)
- ・範囲内複数の会話を捉える
- ・卓上マイク機能 (マルチマイク+/プロ)
- ・テレコイル (マルチマイク+/プロ)
- ・充電式連続使用時間：
約15/11/10時間
(マルチマイク+/プロ/マイク)



1年保証

ボイスリンク・プロ
55,000円(税込)



1年保証

ボイスリンク・マイク
44,000円(税込)



1年保証

マルチマイク+
66,000円(税込)

※Envision Commence Sereneのみ対応



お手元で聞こえを調整

補聴器の小さな調整ボタンが
押しづらい方でも、簡単に音量調整や
メモリ切替ができます。

1年保証

ミニリモコン

- ・操作インジケータ付
- ・コイン型リチウム電池式 (CR2032)
16,500円(税込)



ワイヤレス機器対応表 ※CICは除く

	TV ストリーマー+	TVリンク2	マルチ マイク+	ボイスリンク プロ	ボイスリンク マイクロ	ミニリモコン	ダイレクト通信		アプリ							
							iPhone	Android		Hear Max						
Envision	●	●	●	●	●	●	●	●								
Commence																
Serene																
Achieve	—		—													
Imagine																
Amaze																
Boost Ultra																
Rely 4+3																
Rely 2	—		—	—			—	—								
Rely 1																

※心臓ペースメーカーをご使用されている場合、必ず15cm以上離してお使いください。 ※ワイヤレス機器をご使用の場合、途中でストリーミングモードから通常のマイクモードになることがあります、その場合は新しい電池に交換が必要となります。(通常のマイクモードでは引き続き使用可能な場合があります) ※ワイヤレス機器をご使用の場合は、使用しない場合よりも電池寿命が短くなります。(連続使用での電池寿命：312 電池＝約30 時間前後、13 電池＝約60 時間前後)

アクセサリパーツ一覧

RIC用耳栓各種 (1個) 440円(税込)

オープンドーム
・S : 5mm
・M : 7mm
・L : 10mm

クローズドーム
・S : 5mm
・M : 7mm
・L : 10mm

パワードーム
・S : 8mm
・M : 9mm
・L : 11mm

チューリップ
ドーム
13mm

BTE用耳栓
・SS・S・M・L
1個 220円(税込)



RIC用レシーバー (1個) 37,400円(税込)

Envision
Serene
Achieve

SF3 MM
・0番・1番・2番・3番・4番



RIC用レシーバー各種 (1個) 17,600円(税込)

Envision
Commence
Serene
Achieve

SF3 LP
・0番・1番・2番・3番・4番

SF3 MP
・0番・1番・2番・3番・4番

SF3 HP
・0番・1番・2番・3番・4番

Amaze
Rely

SF2C LP
・0番・1番・2番・3番・4番

SF2C MP
・0番・1番・2番・3番・4番

SF2C HP
・0番・1番・2番・3番・4番

*UPレシーバー (Amaze/Relyのみ) は、プレートモールド代込みで26,000円(非課税)となります。

耳かけ用フック

76用フック
ノーマルダンパー・チャイルドダンパー
ベビーダンパー
1個 770円(税込)



86用フック
ノーマル・チャイルド・ベビー
1個 440円(税込)



耳かけ用スリムチューブ

76用
スリムチューブ
1個 440円(税込)



スリムチューブ用
ジョイント
1個 660円(税込)



ワックスフィルター / マイクフィルター

ワックスフィルター
8個入 990円(税込)



・MM用マイクフィルター 8個入 1,210円(税込)
・RIC用マイクフィルター 8個入 1,210円(税込)
※Envision・Commenceのみ
・76/86DW用マイクフィルター 8個入 1,210円(税込)
※充電式のみ

イヤークチェーン (1個) 1,100円(税込)

イヤークチェーン
片耳



イヤークチェーン
両耳



金具はシルバー/ゴールド、チェーンは紺/茶からお選びいただけます。

モールド (1個) 10,000円(非課税)

オープンモールド
・RIC MP/HP/MM用
・スリムチューブ用



Nモールド
・RIC SF2C/SF3
LP/MP/HP/MM用



プレートモールド
・RIC MP/HP/UP用
※Envision・Commence・Serene・Achieveは不可



ベルトーン製品 性能一覧

オーダーメイド	90dB最大出力音圧レベル		最大音響利得 (dB)		誘導コイル 入力の 最大感度 (±6dB)	使用 電池	電池寿命 時間 (約)
	最大OSPL90 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	ピーク (+3dB以下)	HFA-FOG (±5dB以内)			
Serene CIC MP/HP	116/121	114/118	50/60	45/52	—	10A	109/126
Serene カナル DW MP/HP/UP	117/120/130	114/118/124	50/60/68	45/54/61	—	312	163/168/176
Serene カナル DWC MP/HP/UP	118/121/130	114/119/125	50/60/70	45/54/63	—	リチウム	24h
Serene カスタム DWC MP/HP/UP	118/121/130	114/119/125	50/60/70	45/54/63	—	リチウム	24h
Achieve CIC MP/HP	116/121	114/118	50/60	45/52	—	10A	109/126
Achieve カナル DWC MP/HP/UP	118/121/130	114/119/125	50/60/70	45/54/63	—	リチウム	24h
Achieve カスタム DWC MP/HP/UP	118/121/130	114/119/125	50/60/70	45/54/63	—	リチウム	24h
Amaze CIC MP/HP	118/120	114/119	50/60	45/53	—	10A	86/81
Amaze カナルDW-312 MP/HP/UP	118/120/129	114/119/124	50/60/70	45/53/62	—	312	141/143/141
Amaze カナルDW-13 MP/HP/UP	118/120/129	114/119/124	50/60/70	45/53/62	—	13	239/243/239
Amaze カスタムDW MP/HP/UP	118/120/129	114/119/124	50/60/70	45/53/62	—	13	239
Rely CIC MP/HP	118/120	114/119	50/60	45/53	—	10A	73/76
Rely カナルDW-312 MP/HP/UP	118/120/129	114/119/124	50/60/70	45/53/62	—	312	125/132/136
Rely カナルDW-13 MP/HP/UP	118/120/129	114/119/124	50/60/70	45/53/62	—	13	213/224/231
Rely カスタムDW MP/HP/UP	118/120/129	114/119/124	50/60/70	45/53/62	—	13	231

オーダー
メイド

●本データはJIS C5512-2015の2ccカプラに基づいて測定表示されています。
●実際の電池寿命は使用環境、ワイヤレス機能の使用状況に影響されます。 ●ワイヤレス対応器種の電池寿命については、ワイヤレス未使用の時間です。
●補聴器は適切なフィッティング調整によりその効果が発揮されます。しかし装着者のきこえの状態によってはその効果が異なる場合があります。



RIC/BTE	90dB最大出力音圧レベル		最大音響利得 (dB)		誘導コイル 入力の 最大感度 (±6dB)	使用 電池	電池寿命 時間 (約)
	最大OSPL90 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	ピーク (+3dB以下)	HFA-FOG (±5dB以内)			
Envision 62DW・ 64DW MR	115	113	61	50	—・80	リチウム ・13	24h・250
Envision 62DW・ 64DW MP	115	113	60	55	—・86	リチウム ・13	24h・250
Envision 62DW・ 64DW HP	120	118	60	54	—・86	リチウム ・13	24h・250
Commence 62DW・ 64DW MP	115	113	60	55	—・86	リチウム ・13	24h・250
Commence 62DW・ 64DW HP	120	118	60	54	—・86	リチウム ・13	24h・250
Serene 62S-DWC・ 63DW312 MR	115	110	53	47	—	リチウム ・312	24h・158
Serene 62S-DWC・ 63DW312 MP	116	113	59	53	—	リチウム ・312	24h・158
Serene 62S-DWC・ 63DW312 HP	120	117	63	59	—	リチウム ・312	24h・158
Rely 63DW・64DW MP	116	113	58	50	—・81	リチウム ・13	24h・235
Rely 63DW・64DW HP	120	117	65	57	—・89	リチウム ・13	24h・237
Rely 63DW・64DW UP	128	124	75	65	—・96	リチウム ・13	24h・231
Serene 76DW	128	122	60	53	83	リチウム	24h
Serene 86DW	133	129	67	61	92	リチウム	24h
Amaze 76DW	126	122	57	52	83	13	233
Amaze 86DW	134	130	68	62	92	13	237
Rely 76DW	126	122	57	52	83	13	217
Rely 86DW	134	130	73	67	92	13	200
Rely 95DW	141	130	83	67	98	675	500
Boost Ultra 95DW	141	130	83	67	114	675	500
S90-SP	142	132	75	67	123	675	225

レシー
バー
分離
型

耳
かけ
型